


# PLUS

[WWW.ROTAID.COM](http://WWW.ROTAID.COM)

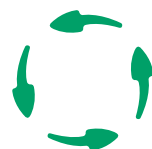

**ROTAID™**  
AED CABINETS

# ROTAID PLUS

## PRODUCT SHEET

De Rotaïd Plus is een innovatieve wandkast voor een herkenbare behuizing van uw AED. De karakteristieke ronde vorm en groene kleur maken uw AED snel en eenvoudig vindbaar en zorgen voor een hoogwaardige uitstraling. Het grote AED logo, alsmede het kijkvenster, laten geen ruimte voor interpretatie. Deze opvallende wandkast bevat levensreddende apparatuur.



Met een intuïtieve draaibeweging is de Plus snel en eenvoudig te openen. Doordat de gehele kap wordt verwijderd, heeft u volledige toegang tot de AED, die via de ophangbeugels snel te grijpen is. De kap blijft door middel van een lederen band aan de achterwand hangen. Via een roestvrijstalen haak aan de onderzijde van de Plus kunt u eenvoudig een zegel, tag of ander item bevestigen.

De ronde kap, voorzien van uitsparingen voor een ferme grip, is vervaardigd uit 100% krasbestendig Polycarbonaat, in een dikte van 5 millimeter. Dit zorgt voor een robuuste, stof- en waterdichte behuizing van uw AED. De kap is voorzien van UV filters, om uw AED tegen direct en indirect zonlicht te beschermen en garandeert daarnaast een langdurige transparantie.




De Plus kan optioneel worden voorzien van een visueel en / of akoestisch alarm of AED standaard (te gebruiken bij AED zonder handvat).




Door moderne productietechnieken en het gebruik van gerecyclede kunststoffen, kan de Plus met recht een duurzame wandkast worden genoemd.

# ROTAID PLUS

## TECHNISCHE DETAILS

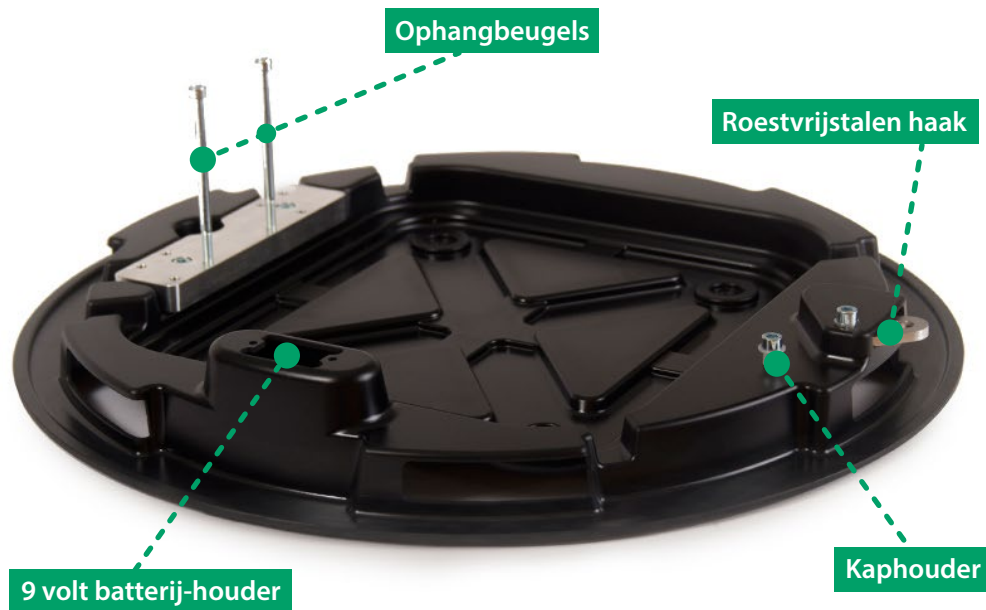

De achterwand is vervaardigd uit 100% ABS en biedt plaats aan vrijwel ieder merk en type AED op de markt. Aan de voorzijde is een voorziening voor een 9 Volt batterij-houder getroffen.

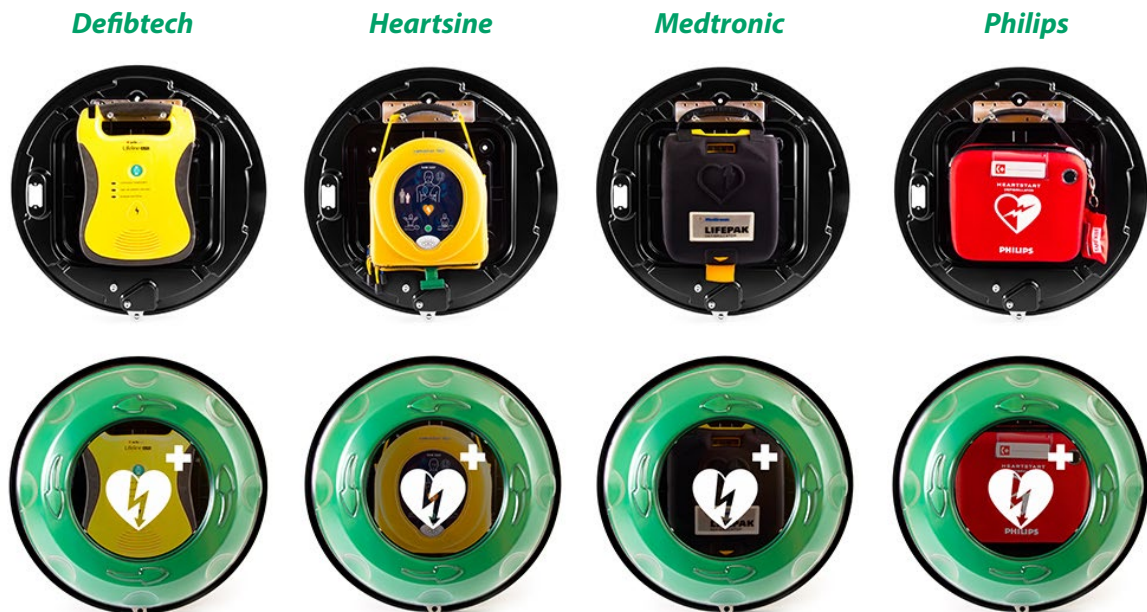

Tevens te gebruiken met o.a. *Cardiac Science, CU Medical, Primedic, Schiller en Zoll*

### Afmetingen

Lengte **47 cm** Breedte **47 cm** Diepte **18 cm** Gewicht **1,7 kg**

Individueel verpakt, bevestigingsmaterialen worden meegeleverd.