

PLUS

WWW.ROTAID.COM



ROTAID™
AED CABINETS

ROTAID PLUS

PRODUCT SHEET

De Rotaïd Plus is een innovatieve wandkast voor een herkenbare behuizing van uw AED. De karakteristieke ronde vorm en groene kleur maken uw AED snel en eenvoudig vindbaar en zorgen voor een hoogwaardige uitstraling. Het grote AED logo, alsmede het kijkvenster, laten geen ruimte voor interpretatie. Deze opvallende wandkast bevat levensreddende apparatuur.



Met een intuïtieve draaibeweging is de Plus snel en eenvoudig te openen. Doordat de gehele kap wordt verwijderd, heeft u volledige toegang tot de AED, die via de ophangbeugels snel te grijpen is. De kap blijft door middel van een nylon band aan de achterwand hangen. Via een roestvrijstalen haak aan de onderzijde van de Plus kunt u eenvoudig een zegel, tag of ander item bevestigen.

De ronde kap, voorzien van uitsparingen voor een ferme grip, is vervaardigd uit 100% krasbestendig Polycarbonaat, in een dikte van 5 millimeter. Dit zorgt voor een robuuste, stof- en waterdichte behuizing van uw AED. De kap is voorzien van UV filters, om uw AED tegen direct en indirect zonlicht te beschermen en garandeert daarnaast een langdurige transparantie.




De Plus kan optioneel worden voorzien van een akoestisch alarm of AED standaard (te gebruiken bij AED zonder handvat).



Door moderne productietechnieken en het gebruik van gerecyclede kunststoffen, kan de Plus met recht een duurzame wandkast worden genoemd.

ROTAID PLUS

TECHNISCHE DETAILS

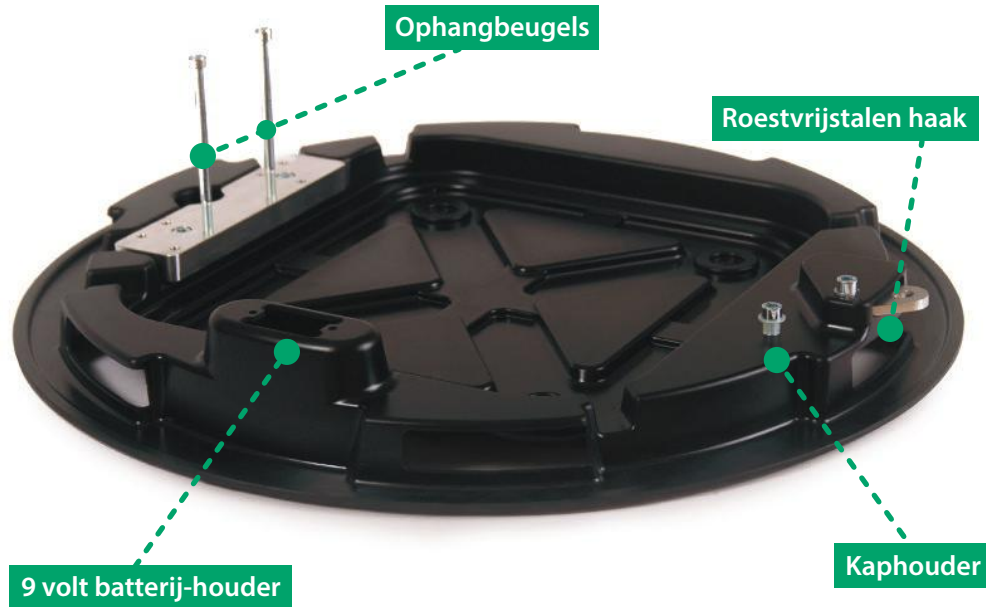

AFMETINGEN

Lengte **47 cm** Breedte **47 cm** Diepte **18 cm** Gewicht **1,7 kg**

Lengte **18,5"** Breedte **18,5"** Diepte **7,1"** Gewicht **3,75 lbs**

Packed individually by box, fastening materials included.

ROTAID PLUS

PRODUCT OVERZICHT

TOEPASSING: Binnen gebruik. **WAARSCHUWING:** niet voor buitengebruik!

Afmetingen

Lengte **47 cm** Breedte **47 cm** Diepte **18 cm** Gewicht **1,7 kg**

Achterwand

100% gerecycled ABS (Acrylonitril-butadien-styreen), dikte 4 millimeter.

Voorzien van massief aluminium blok met voorgeboorde instellingen voor ophangbouten (2 meegeleverd, cilinderschroef DIN 912 8.8 EV M 6 x 80).

5 bevestigingsogen voor wandbevestiging (5 plaatschroeven DIN 7981 RVS A2 5,5 x 60 mm alsmede 5 ringen DIN 9021 A2 M 6 x 18 x 1,6 worden meegeleverd).

RVS haak met oog bevestigd aan onderzijde ten behoeve van plaatsing zegel, slot of andersoortige accessoires.

Kap

100% Polycarbonaat, gerecycled, volledig transparant, dikte 5 millimeter

Voorzien van UV filters en UV blockers.

Voorzien van boomband, materiaal nylon (5 centimeter breed, circa 40 centimeter lang), lasergesneden, om kap aan achterwand te bevestigen.

4 richtlijnpijlen geven aanwijzingen voor het openen van het apparaat.

6 inkepingen zorgen voor een snelle en solide opening.

Beschikbare kleuren: groen, geel, rood

Accessoires / optioneel

90 db auditief alarm, geactiveerd door een laag vermogen magneet, munt grootte, in de kap, heeft een ABS behuizing en is vooraf geïnstalleerd en gefixeerd aan de achterplaat.

Het alarmapparaat wordt aangedreven door 2 AAA batterijen.

Bovenop het alarm is een resetknop om het alarmsysteem te pauzeren indien nodig.

Verpakking

Witte doos, FEFCO 0201, die voldoet aan FSC-eisen.

Verpakkingsgrootte 50 x 50 x 25 centimeter / 19,7 x 19,7 x 9,8 inch.

COMPATIBEL MET: Alle AED merken en types

Controleer uw AED op www.rotaid.com/indoor-aed-cabinets/plus#specifications